

ジェット水流で、歯と歯ぐきの健康に

インタープラーク[®]

デンタル・ウォーター・ジェット

毎分2,500パルス(50Hz)・2,900パルス(60Hz)
のパワフルな歯と歯ぐきの洗浄器。




INTERPLAK[®]

DENTAL WATER JET

デンタル・ウォーター・ジェット WJ6R

パワフルなジェット水流で、歯ブラシやフロスの届きにくい部分もしっかり洗浄。
口腔内を爽快に保ちます。

ご家庭で素早く、しかも簡単に操作でき、口腔内を爽快に保つ歯と歯ぐきの洗浄器です。1分間に2,500パルス(50Hz)・2,900パルス(60Hz)のジェット水流により、歯と歯の間、ブリッジ、矯正装置、インプラントの周りなど、歯ブラシやフロスが届きにくい部分の食片や細菌をしっかりと除去します。タンク内の水に洗口液などを加えて使用することもできます。

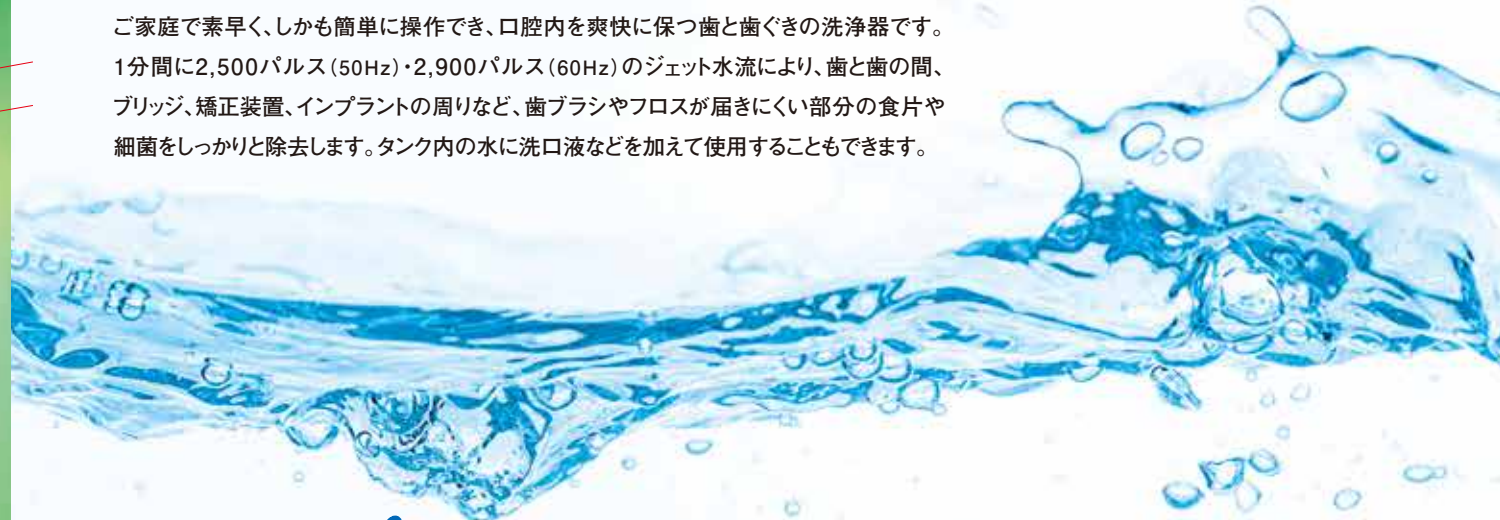

インタープラーク[®]

デンタル・ウォーター・ジェットの3つの特徴

歯磨きでは 得られない爽快感

初めてご使用になる方は不慣れなため、周囲に水を飛散させたり、歯ぐきに痛みを感じたりして少し戸惑うことがあるかも知れません。しかし、しばらく続けるうちにデンタル・ウォーター・ジェットによるクリーニング後の爽快感にお気づきになるはずです。リザーバー(水槽)に市販のマウスリンスを少し加えると、さらに清涼感が加わります。


毎分2,500パルス(50Hz)・ 2,900パルス(60Hz) のジェット水流

毎分2,500回(50Hz)・2,900回(60Hz)定期的に水を噴射する能力があり、歯の表面や歯と歯の間、歯と歯ぐきの間などをパワフルな水流で素早く、効率良くクリーニングすることができます。水量は、お好みに合わせて調整することができます。

コンパクトな デザイン・簡単な操作

コンパクトにデザインされているため場所を取らず、またハンドルもたいへん軽く、どなたでも楽にお使いいただけます。操作は水量の調節つまみとON/OFFつまみのみでとても簡単。リザーバー(水槽)は簡単に取り外しができるため、水の補給に手間取ることもありません。

コンパクトなサイズで、場所をとらず使いやすさも抜群です。

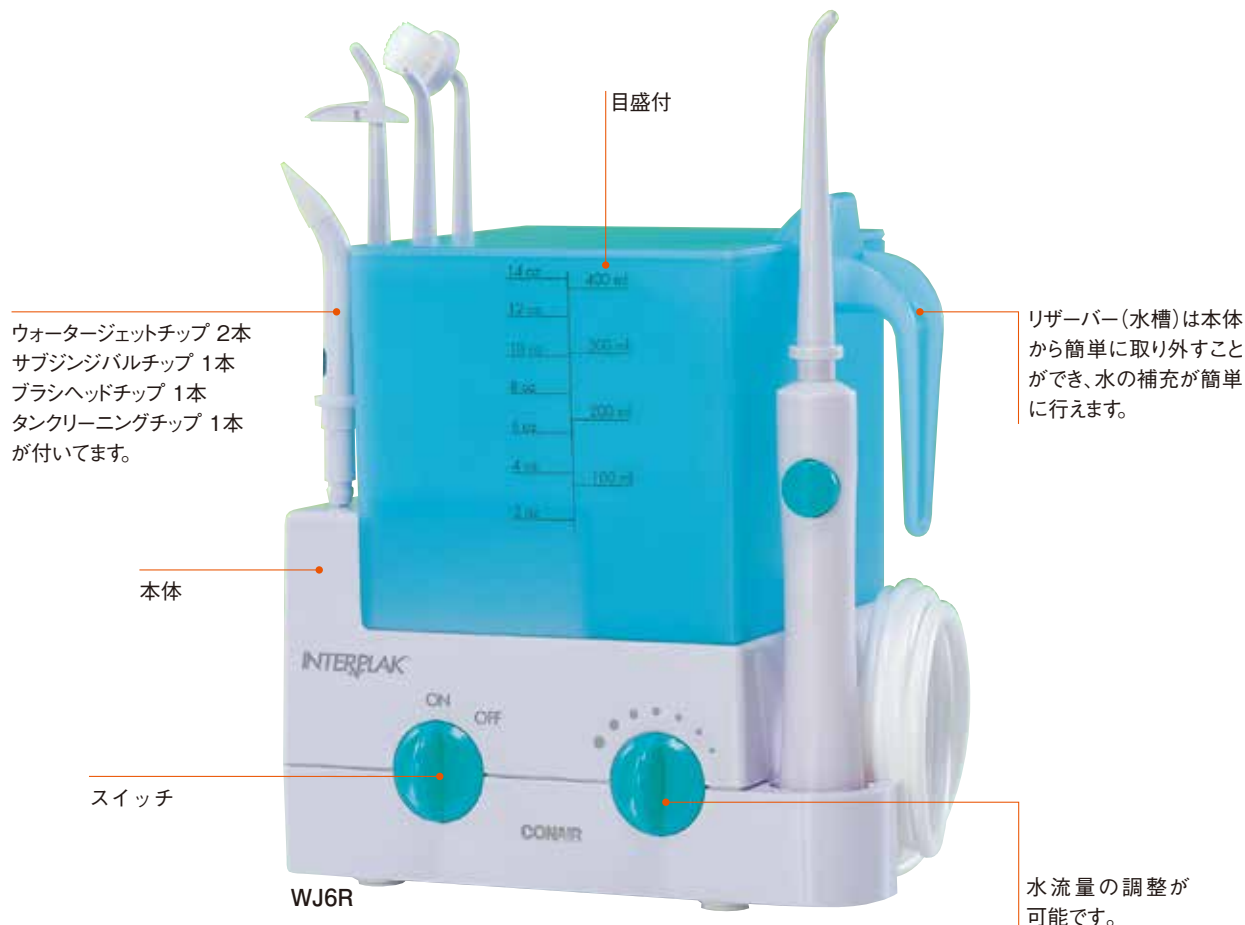

ウォータージェットチップ 2本
サブジンジバルチップ 1本
ブラシヘッドチップ 1本
タンククリーニングチップ 1本
が付いています。

リザーバー(水槽)は本体から簡単に取り外すことができ、水の補充が簡単に行えます。

水流量の調整が可能です。

WJ6R



歯の表面や歯と歯の間に沈着した食片や細菌は、数時間で歯垢になり、やがて石灰化して歯石になります。デンタル・ウォータージェットのジェット水流は、歯垢の元になる食片や細菌を吹き飛ばします。



矯正装置、クラウン、ブリッジ、インプラント周辺など、歯磨きのしにくい場所のクリーニングにデンタル・ウォータージェットは最適です。毎分2,500(50Hz)・2,900(60Hz)・パルスのジェット水流が、装置の周りを素早く確実にクリーニングします。

インタープラク デンタル・ウォータージェット WJ6R 863-0805

- 電源：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：50Hz/30W 60Hz/26W
- 水流パルス：50Hz:約2,500回/分
60Hz:約2,900回/分
- 流量範囲：約60~400ml/分
- 水容量：400ml
- サイズ：幅135×奥行105×高さ150(mm)
- 重量：1.05kg
- 付属品：ウォータージェットチップ 2本、サブジンジバルチップ 1本、ブラシヘッドチップ 1本、タンククリーニングチップ 1本、取扱説明書(保証書含む)

交換用ジェットチップのほか、 目的にあった専用チップも ご用意しています。

ウォータージェットチップ

デンタル・ウォータージェット本体に付属している標準的なチップです。歯間、歯肉縁下(歯と歯肉の間)、ブリッジ、矯正装置の周囲など、全般的な口腔内洗浄にご使用いただけます。

4本入パック 863-7754



サブジンジバルチップ

特に歯肉縁下(歯と歯肉の間)をクリーニングするためのチップです。ゴム製で先端が細いため、歯と歯ぐきの間に容易にジェット水流を当てることができます。

4本入パック 863-9863



デンタル・ウォータージェットは、当医院で取り扱いしております。

製造元: **CONAIR** (コンエア社) U.S.A.

輸入販売元: **FEED** フィード株式会社

商品インフォメーションデスク TEL 0120-004-504